



# Premier

**premier**

Instrumental	142
Higiene	144
Prótesis	145
Endo	147
Restauración	147
Limpiadores	148
Pasta Pulidora Two Striper	149

## Ancladén

Apostamos por los **profesionales**

[www.ancladen.com](http://www.ancladen.com)   

# Instrumental

## PerioWise™

Sondas periodontales blandas



- Ideal para un completo examen o una rápida exploración
- Fácil localización de las bolsas gracias a sus bandas de color verde y rojo.
- No dañan la encía. Muy útiles cuando hay implantes
- Autoclavables.



REF. 9006108  
**49,00 €**  
3-6-9-12 mm.  
Pack de 3 u.

REF. 9006107  
**49,00 €**  
3-5-7-10 mm.  
Pack de 3 u.

## Spreaders

Espaciadores NiTi


- Las propiedades del Ni-Ti, permiten trabajar los canales más curvados.
- Muy flexibles y sin efecto "memoria". Se doblan y recuperan la forma inicial

Ni-Ti D11

REF. 1003905  
**36,00 €**

Ni-Ti D11T

REF. 1003906  
**36,00 €**

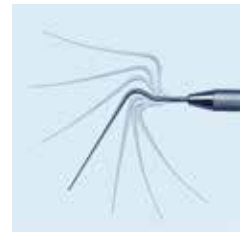

## Espátulas

Para composite de aluminio

- La superficie negra del aluminio anodizado evita que el composite se pegue al instrumento.
- Para su limpieza y esterilización no mezclar con instrumentos de otros metales.
- No exponer a disoluciones de pH superior a 8 o que contengan iodoforos.

CCI S/M

REF. 1003899  
**30,00 €**



CMI 2

REF. 1003895  
**30,00 €**



CMI 3

REF. 1003896  
**30,00 €**



CMI 5

REF. 1003898  
**30,00 €**



## Big Easy™

Ultralite™ Instrumental para curetaje

- Reduce la fatiga, previene la patología del tunel carpiano
- Limpiadores y Curetas de acero inoxidable, con mango de resina cubierto de silicona
- Los instrumentos más ligeros, (solo 16 g.), con los mangos más anchos
- Autoclavables



### Sickle H6/H7

REF. BEUL-05621

42,00 €



### Gracey 5/6

REF. BEUL-05605

42,00 €



### Gracey 7/8

REF. BEUL-05607

42,00 €



### Gracey 11/12

REF. BEUL-05611

42,00 €



### Gracey 13/14

REF. BEUL-05613

42,00 €



### Columbia 4L/4R

REF. BEUL-05615

42,00 €



### Columbia 13/14

REF. BEUL-05617

42,00 €



## Implant Scaler

Curetas para limpieza de implantes

- No rayan la superficie del implante
- Fabricados a base de Grafito de alta densidad
- Pueden re-afilarse
- Autoclavables

REF. 9061401

65,00 €

Pack de 2 u.




## Enamel Pro™

La única pasta para profilaxis con ACP

- El fosfato cálcico amorfo (ACP), estimula la remineralización del esmalte dental.
- **Enamel Pro libera un 31% más de Fluor que las pastas convencionales.** Enamel Pro contiene el mismo porcentaje de Fluoruro, (1,23%) que otras pastas similares. Sin embargo, la tecnología ACP, libera un 31% más Fluor en el esmalte.
- El ACP previene de la pérdida de esmalte.
- En contacto con el esmalte, Enamel Pro actúa como una pasta de pulido, y con efecto abrillantador de la superficie.
- Agradable para el paciente. Actúa en poco tiempo, no salpica, fácil de enjuagar, consistencia suave.
- Disponible en distintos grados de abrasividad, y agradables sabores a menta y fresa.



**Enamel Pro.**  
Caja de 200 ud.  
Contiene 200 copas individuales y dos recipientes Comfy-Grip.

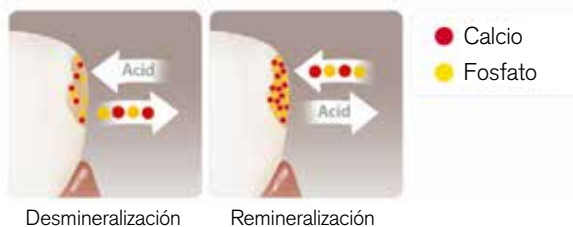

### FRESA Con Fluoruro

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP
9007607	Fino	77,00 €
9007608	Medio	77,00 €
9007609	Grueso	77,00 €



### MENTA Con Fluoruro

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP
9007600	Fino	77,00 €
9007601	Medio	77,00 €
9007602	Grueso	77,00 €



## Traxodent™

Hemostasia y Retracción fácil y rápida

La jeringa con tips flexible permite la aplicación fácil del Traxodent directamente en el surco.  
Después de dos minutos, se lava con agua dejando un surco retractorado y accesible.



### Traxodent Starter Pack

REF. 9007093

**131,00 €**

7 jeringas y 15 tips

### Traxodent Pack

REF. 9007097

**36,00 €**


2 jeringas y tips

### Tips Traxodent

REF. 9007092

**53,00 €**

50 tips

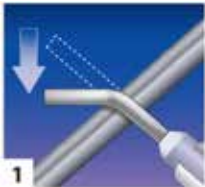


**1**  
Doblar el tip para acceso óptimo



**2**  
Posicionar el tip paralelo al plano axial del diente



**3**  
Dispensar material suficiente para desplazar el tejido

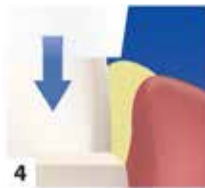

**4**  
Posicionar el Premier Capuchón de Retracción sobre el diente



**5**  
Pedir que el paciente muerda y mantenga la presión sobre el Capuchón. Esperar 2 min.



**6**  
Lavar fácilmente y quedará el surco abierto y accesible

### Técnica de hilo de retracción (opcional)

Traxodent elimina la necesidad de usar dos hilos de retracción.



Posicionar un hilo de retracción



Dispensar material suficiente para desplazar el tejido. Esperar 2 min.



Lavar fácilmente y quedará el surco abierto y accesible

## Knit-Pak™

Hilo tejido de retracción

El hilo de retracción gingival Knit-Pak™ es un hilo tejido no impregnado hecho 100% de algodón.

Knit-Pak™ es ideal para el uso en combinación con el agente hemostático Hemodent® o Traxodent® para el desplazamiento y control del tejido antes de tomar una impresión. El hilo tejido contiene varias cadenas entrelazadas que llevan mayores cantidades de solución hemostática en comparación con el hilo retorcido o trenzado. Knit-Pak se introduce fácilmente en el surco mediante la compactación bajo presión. No se deshilacha ni sobresale del surco. Si se toca con una fresa, Knit-Pak posee un corte limpio y no se enredará.

Los 3 tamaños diferentes de Knit-Pak están codificados por colores para su identificación rápida y fácil.

Cada Knit-Pak contiene 100 pulgadas (254 cm) de hilo.

- REF. 9007551 Tamaño **000**
- REF. 9007552 Tamaño **00**
- REF. 9007553 Tamaño **0**

19,00 €

# Knit-Pak™

## Hilo tejido de retracción



La hoja de acero inoxidable situada dentro de la tapa corta automáticamente el hilo cuando se cierra.



La tapa sostiene el segmento de hilo hasta que se retira, para que el hilo no se caiga. Protege el segmento de hilo y el recipiente de la contaminación cruzada.



Trama tejida no impregnada

## Hemodent™

Premier Hemodent™ es una solución hemostática que controla rápidamente el sangrado gingival antes de tomar una impresión o mientras coloca una tira, una cinta o una matriz cervical.

· También puede ser usado después de cirugías y limpiezas.

REF. 9007071  
20,00 €  
Hemodent 10cc



## RC-Prep™

Para la preparación de canales intraradiculares

El gel RC-Prep por su única fórmula a base de glycol, peróxido de urea y EDTA ayuda a desobturar calcificaciones y lubricar los canales intraradiculares, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un buen tratamiento.

REF. 9007135

44,00 €

Pack de 2 jeringas de 9 g.



REF. 9007132

41,00 €

Pump 18 g.



# Restauración

## Implant Cement

Alta retención - Larga cementación

### Recuperación y fácil extracción cuando lo necesite

- El cemento para implantes Premier ofrece retención y recuperación en un solo producto.
- Cemento de baja solubilidad, fácil de usar con jeringa de doble canal auto mezclante.
- Color natural no tiene ni sabor ni olor.
- No contiene Eugenol y elimina la sensibilidad.
- Cemento a base de resina elástica.

REF. 3001450

60,00 €

Cartucho de 5 ml.


Doble jeringa automezclante más 10 cánulas

Syringe Tips


REF. 3001451

29,00 €


10 puntas mezcladoras

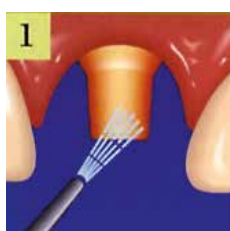

1 Secar y aislar los muñones preparados.

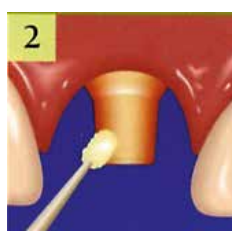


2 Para facilitar la recuperación, lubricar la superficie con una capa de lubricante K-Y.

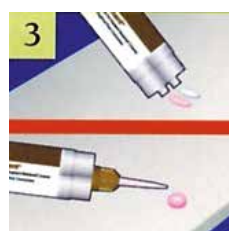

3 Sangre la jeringa antes de la instalación de la punta auto mezclante.



4 Coloque directamente una capa delgada del cemento en la restauración.

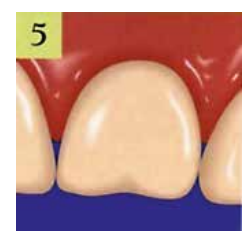

5 La cementación final del producto es entre 4-5 min.

## Brite Shield™

Limpiador y protector de instrumentos

- Limpieza **eficaz**. Su acción enzimática es hasta un 35% más rápida. **Elimina** proteínas e impurezas.
- **Protege** los instrumentos contra la oxidación y corrosión proporcionando una superficie lustrosa.
- Limpia y protege las fresas de diamante.
- Introduzca una cucharada del producto en 2 l. de agua tibia. Para instrumentos muy sucios use dos cucharadas. Para limpiar cementos, introduzca dos cucharadas en 200 ml. de agua.
- Se puede utilizar en el baño de ultrasonidos, de 1 a 5 minutos; o bien en cubeta durante 15 minutos.
- Envase de 800 g.



REF. 9011100  
**70,00 €**  
800 g.


## Pro Clean™

Eliminador profesional de sarro y manchas

**Para dentaduras postizas, dentaduras parciales, retenedores y protectores nocturnos**

- 🔄 Sumamente eficaz.
- 🔄 Mezcla y aplicación fácil, sin desperdicio.
- 🔄 Seguro y respetuoso con el medio ambiente.
- 🔄 Úselo en el consultorio odontológico y entrégueselo al paciente para su uso en el hogar.  
Ideal para retenedores y protectores nocturnos.

🌱 Los productos limpiadores de Premier® son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente

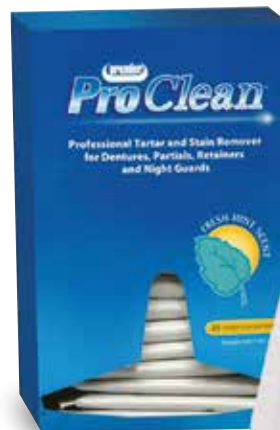

REF. 9011103  
**42,00 €**  
Caja de 25 sobres  
CE



## Vac Attak™

Limpiador de sistemas de evacuación

- Limpia y **desodoriza** su sistema de evacuación.
- Es **biodegradable**, no produce espuma y no es corrosivo.
- Su composición a base de quelatos y cloro orgánico es muy eficaz, eliminando todo tipo de residuos orgánicos.
- Económico. Un envase contiene producto para 100 limpiezas.
- Envase de 800 g.



REF. 9011101  
**70,00 €**  
800 g.



## Luminescence Plus™

Pasta abrillantadora de diamante con desensibilizador incorporado



REF. TS-LUM-PLUS

**40,00 €**

Jeringa 3 g.

Excelente pulidor de pasta de diamante para todas las superficies dentales. Ahorra tiempo por su rapidez.

El Luminescence Plus está patentado con una formulación para trabajar en un sólo paso y contiene un desensibilizante tópico para un mayor confort del paciente.

Para usar en composites, porcelana, ionomero de vidrio, amalgama, metales preciosos y esmalte.